


Het SomnoDent® MRA is een op maat gemaakte beugel ter behandeling van snurken en obstructief slaapapneu.

Door een verbindingmechanisme wordt de kaak voorzichtig in de gewenste therapeutische positie geplaatst.

Deze voorwaartse positie voorkomt dat de tong naar achteren zakt en zorgt voor het aantrekken van de hoofd-hals musculatuur en van de bovenste luchtweg.

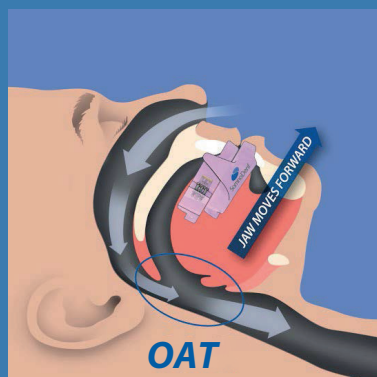


Door het gepatenteerde vleugelverbindingmechanisme wordt de onderkaak voorzichtig naar voren bewogen in de gewenste therapeutische positie en blijven de luchtwegen open tijdens het slapen.

#### SomnoDent®

#### MRA vs CPAP

Maakt een normale mondopening mogelijk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maakt praten en drinken mogelijk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemakkelijk mee te nemen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geruisloos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onhandig gezichtsmasker	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bepaalde slaapposities	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gecomplieerde reiniging	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vereist stroomaansluiting	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

  
SomnoMed®

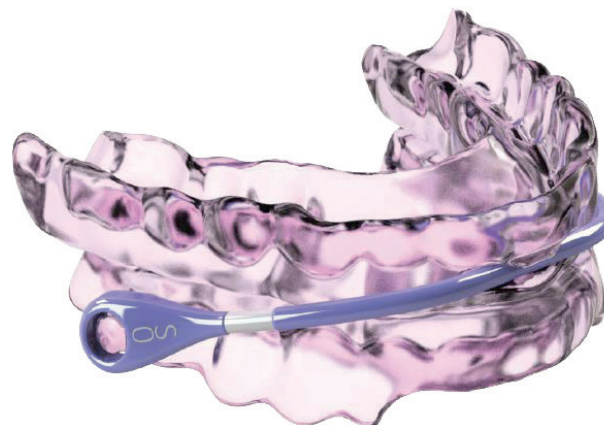

[www.somnomed.com](http://www.somnomed.com)

SomnoMed AG is ISO-gecertificeerd SomnoMed producten zijn geregistreerd in: EU, VK, Zwitserland, Verenigde Staten, Canada, Australië, Zuid-Korea, Japan, Hong Kong

Onze producten zijn gepatenteerde op maat gemaakte medische hulpmiddelen.

**SomnoMed AG Europe**  
Steinhauserstrasse 74  
CH-6300 Zug  
Zwitserland  
[www.somnomed.com](http://www.somnomed.com)

[contactbenelux@somnomed.com](mailto:contactbenelux@somnomed.com)

PRENEU-012023

  
SomnoMed

## DE INNOVATIEVE PRODUCTEN VAN SOMNOMED

[www.somnomed.com](http://www.somnomed.com)

Het SomnoDent® MRA is een Mandibulair Repositie Apparaat dat een zeer effectieve behandeling tegen obstructieve slaapapneu (OSA) biedt en voor patiënten heel comfortabel te dragen is.

SomnoMed biedt patiënten, verwijzers, en NVTSGeaccrediteerde tandartsen een klinisch bewezen, comfortabel alternatief voor CPAP. De SomnoDent® MRA's zijn op maat gemaakte medische hulpmiddelen en worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering bij een AHI vanaf 5 of hoger.

SomnoDent® MRA's zijn geïndiceerd voor de behandeling van milde en matige obstructieve slaapapneu (OSA) en voor patiënten die intolerant zijn voor andere therapie opties.

## Intraoraal scannen



Scan de gebitsafdruk en de proale beetregistratie en zend deze digitaal naar het tandtechnisch lab.



Werkt snel en schoon zonder verbruik van afdrukmaterialen.



Comfortabel voor u en uw patiënt zonder kokhals effect.



Efficiënte werkwijze.



Perfekte pasvorm.

**SomnoDent Features:** SomnoDent MRA's zijn op maat gemaakt. Daardoor voor patiënten zeer comfortabel te dragen. Dat maakt ze bijzonder effectief.

**Hoge kwaliteit:** we gebruiken de meest hoogwaardige materialen en geven 2 jaar garantie in België en 5 jaar garantie in Nederland op onze MRA's.

**Klinisch gevalideerd:** onze SomnoDent MRA's zijn wereldwijd in meer dan 17 onafhankelijke klinische studies gevalideerd.

**Selectie MRA's:** we bieden een uitgebreid assortiment aan van verschillende uitvoeringen.

**Therapietrouw:** 96% van de patiënten wilt het SomnoDent MRA graag blijven gebruiken. 91% van de patiënten ervaart een sterke verbetering van slaapkwaliteit.

**Sales ondersteuning:** ons salesteam is zeer actief met het verbinden van de MRA behandelaar met verwijzers.

**Technische ondersteuning:** we hebben een ervaren lab en

**Marketing ondersteuning:** wij ondersteunen u met materialen, events, onze website, advertenties en desgevraagd advies.



### SomnoDent® AVANT

SomnoDent Avant is onze nieuwste MRA, vervaardigd met CAD/CAM-technologie. Met een b-flex Comfort Liner voelt het MRA comfortabel aan en valt het niet van je tanden terwijl je slaapt. Als het comfortabeler is, is de kans groter dat u het draagt en wordt u beter behandeld voor uw slaapapneu.

En het innovatieve ontwerp van de SomnoDent Avant sluit zachtjes je mond, zodat je door je neus ademt terwijl je slaapt. Dit elimineert snurken bij de meeste mensen en voorkomt een droge mond, wat een veel voorkomende klacht is bij andere orale apparaten (en CPAP).

Het MRA biedt laterale vrijheid en heeft een protrusie mogelijk van -1 naar +8 mm.

### SomnoDent® FLEX



De SomnoDent Flex heeft een zachte b-flex Comfort Liner die een ongeëvenaarde pasvorm biedt. De beugels zijn goed verankerd, passen nauwkeurig en zijn heel comfortabel te dragen.

De SomnoDent Flex biedt een comfortabele 'first time fit'.

Perfekte retentie, zelfs voor patiënten met korte tanden, kleine ondersnijding of kroon- en brugwerk.



### SomnoDent® FUSION

Met de SomnoDent Fusion kan de therapeutische voorwaartse positie van de onderkaak nauwkeurig en ergonomisch worden ingesteld door enerzijds de vleugels te verwisselen en anderzijds de schroeven te verstellen. De SomnoDent Fusion is beschikbaar in Flex en Classic versie.

Voorzien van de b-flex Comfort Liner die een ongeëvenaarde pasvorm biedt.

### SomnoDent® EDENT



De SomnoDent Edent is verkrijgbaar in de versies Flex en Fusion voor patiënten met een edentate bovenkaak. De b-flex Comfort Liner bedekt het gehele palatum. De edentate onderkaak moet minimaal twee implantaten bevatten..

### SomGauge



Voor het vastleggen van een nauwkeurige beetregistratie. Het starterspakket is voorzien van de SomGauge en vorkjes in de maten Small (2x) en Large (2x). Het navulpakket bestaat uit Small (20x) of Large (20x).

### SomTabs



SomTabs voor de reiniging van het MRA. Leverbaar in verpakking van 96 tabletten (3 maanden) of 30 tabletten (1 maand).