

Endast SomnoMed tillhandahåller hela produktpaketet & tjänster för tandläkare för att professionellt behandla obstruktiv sömnapné!



Produkter av högsta kvalitet, perfekt passform och snygg förpackning



Bevis: En växande mängd publicerade kliniska artiklar.



2-års garanti: Som är omfattande för att behandla sömnapné.



Produktval: 4 SomnoDent-skenor, 2 retentionstyper och ytterligare tillägg. SomnoMeds produktsortiment erbjuder en behandling som passar alla patienttyper med en 16-arbetsdagers behandlingstid.



SomMorningRepositioner: En bitdeprogrammerare utformad för att återställa patientens underkäke till centrisk ocklusion efter en SomnoDent-skena använts.



SOMGauge: Ett idealiskt bettregistreringsverktyg för exakt och pålitlig enhetstillverkning.



SomTabs: Speciellt framtagna rengöringstabletter.



Remissnätverk: SomnoMed-medarbetare hjälper dig att hitta till lokala sömnmedicinska leverantörer.



Teknisk support: Erfaren labb- och kundtjänstpersonal för alla tekniska frågor och produktvalsfrågningar.



Utbildning: Seminarier & mentorskapsprogram



Kontakta SomnoMed på 08 519 775 75 eller din lokala SomnoMed-försäljare för att diskutera vårt betrodda remissnätverk för dina patientremisser.

www.somnomed.com



Produkt Guide



SomnoMed är världsledande inom tillverkning och distribution av apnéskenor för behandling av snarkningar och sömnapné.



Bygger vårt varumärke på arv, engagemang för innovation och prestanda, våra produkter är tillverkade för komfort och efterlevnad.



Vårt SomnoDent-sortiment av apnéskenor har hjälpt över **750 000 patienter** världen över att behandla sina snarkningar och sömnapné.

SomnoMed® Norcid AB | Tegelluddsvägen 58 115 59 Stockholm, Sverige
Tel: 08 519 775 75 | www.somnomed.com © 2022


Reference

SomnoDent[®]
SLEEP APNEA APPLIANCE




1. Produktutbud

SomnoDent® SLEEP APNEA APPLIANCE

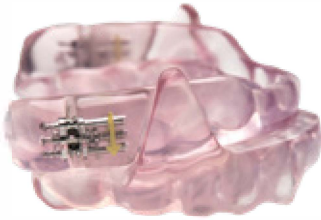

SomnoDent är SomnoMeds original design och består av en separata övre och nedre skena med vår patenterade ving-mekanism. Denna design är beprövad att vara säker och effektiv och erbjuder överlägsen komfort med en hel läpptätning och tillåter normal munöppning för att tala och dricka. SomnoDent är lätt att justera och erbjuder 5,0 mm framskjutande och 0,5 mm bakåt från startpositionen.

SomnoDent® FUSION™ SLEEP APNEA APPLIANCE

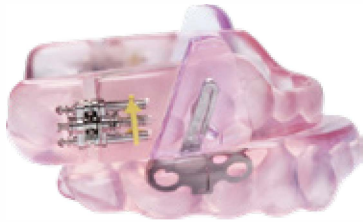

SomnoDent Fusion är en utvecklad version av vår original design. SomnoDent fusion har en ving- och skruvkalibrering. Titringen kan utföras genom att använda skruven eller att byta vingarna. Detta system ger mindre rörelser i sidled med titring och därmed mer komfort för patienten när enheten justeras. SomnoDent Fusion tillåter 7,5 mm framåtskjutande och 0,5 mm justering bakåt, detta extra utrymme för titring innebär färre bättåterställningar.

2. Retentionstyp

SomnoDent Flex

Hård akryl med mjukt b-flex Comfort Liner

Vår unika SMH b-flex Comfort Liner ger överlägsen retention och komfort. b-flex Comfort Liner är mjuka polymer som värmehärdas, packas och pressas; vilket resulterar i en intim passform som inte liknar något annat material, och förankrar enheten även på korta tänder med liten underskärning. SomnoDent Flex är för alla käkformer och att föredra när kron- och broarbete förekommer.

SomnoDent Classic

Hård akryl med kulklemmar

Tillverkad av hård akryl av högsta kvalitet som inte missfärgas. SomnoDent Classic har designats för att erbjuda hållbarhet, komfort och kvalitet. Denna skena har kulklemmar för att skenan ska sitta fast på rätt position och den är enkel att justera med skruvmekanismen på sidan av skenan.

3. Tillval

- Mindre material lingualt
- Fästen för gummidrag
- SomnoDent EDent (Edentulous)
- Andningshål
- Ytterligare sidorörelse
- DentiTrac micro-inspelare



Varför välja SomnoDent?

- ✓ 2 års garanti*
- ✓ Lätt att justera
- ✓ Kliniskt validerad
- ✓ Specialanpassad
- ✓ Full läpptätning
- ✓ Tillåter att öppna munnen
- ✓ Tillåter att prata och dricka



*Villkor gäller

 **SomnoMed**
Treatment Focused | Technology Driven

NYA SomnoDent® AVANT™ SLEEP APNEA APPLIANCE

SomnoDent Avant är vår första skena som både designas och tillverkas digitalt. Både den tuffa akrylbasen och den bekväma b-flex Comfort Liner insidan fräses ut med oöverträffad retention och komfort. Effektiviteten av SomnoDent Avant förstärks av den unika band-mekanismen som säkerställer att underkäken förs framåt och munnen är stängd. SomnoDent Avant-banderna tillgodoser också rörelse i sidled, och byte av band möjliggör framskjutning på upp till 8 mm och 1 mm bakåt från startpositionen.



Strap Kit

Band-upsättningen bestäms av SomnoMed och beror på patientens käkstorlek och bätt registrering som tillhandahålls av tandläkaren. Helt nya SomnoDent AVANT-skenan levereras med avsedd start band monterad på och matchande band kit.



Tillval

- **Främre andningshål**
Ett litet mellanrum som sträcker sig över framtänderna, i sidled längs det ocklusala planet kan begäras för patientens komfort och/eller mer frihet för att hålla tungan framåt.
- **Främre ramp**
Ett litet block som spänner över de två framtänderna är byggt på den övre skenan för att utesluta det bakre området, d.v.s. förhindra kontakt på baksidan.
- **DentiTrac Micro-Inspelning**
En mikroregistrator kan vara inbäddad i den övre skenan i syfte att övervaka patientens följsamhet.