


## Así es como funciona el dispositivo oral

SomnoDent® es un dispositivo oral bibloc hecho a medida gracias a la impresión de los dientes y al registro de mordida del paciente.

El revestimiento interior suave **b-flex Comfort Liner** proporciona una gran sensación de comodidad al paciente. Los altos niveles de satisfacción y aceptación del dispositivo oral contribuyen al éxito del tratamiento.

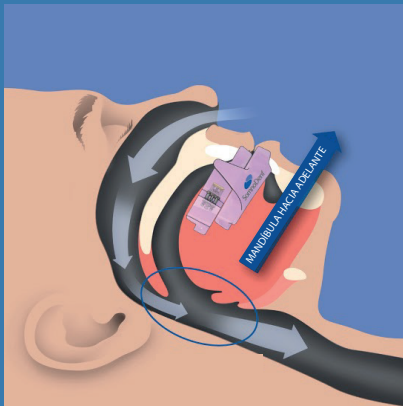


El diseño patentado de aletas se utiliza para mover suavemente la mandíbula hacia adelante y evitar que la lengua y los tejidos blandos bloqueen las vías respiratorias durante el sueño.

### SomnoDent®

### DAM vs CPAP

Permite la apertura normal de la boca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permite hablar y beber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fácil de transportar para viajar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silencioso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Incomodidad de la máscara	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Posiciones limitadas para dormir	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza complicada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Requiere enchufe red eléctrica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SomnoMed®

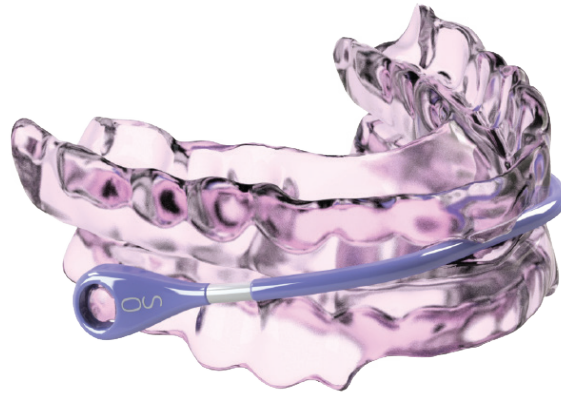

SomnoMed®

## LA INNOVADORA GAMA DE PRODUCTOS DE SOMNOMED

[www.somnomed.com](http://www.somnomed.com)

SomnoMed ofrece a pacientes, a médicos y a dentistas una alternativa cómoda e igual de eficaz que el tratamiento con CPAP. Pacientes de todo el mundo tratan su AOS con dispositivos SomnoDent.

Los dispositivos SomnoDent están indicados para el tratamiento de la Apnea Obstruktiva del Sueño (AOS) de leve a moderada y para pacientes que no toleran otras opciones de tratamiento.

Nuestros dispositivos están clínicamente probados en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño de leve a moderada, respaldados por evidencia médica, tienen un diseño innovador y ofrecen un ajuste cómodo para los pacientes.

[www.somnomed.com](http://www.somnomed.com)

SomnoMed AG cuenta con la certificación ISO 13485  
Los productos SomnoMed están registrados en:  
EU, UK, Suiza, EE.UU., Canadá, Australia,  
Corea del Sur, Japón y Hong Kong.

Los productos SomnoMed están patentados  
como dispositivos médicos de clase I  
y hechos a medida

### SomnoMed Spain

C/ Gomis 34, 08023 Barcelona  
España  
T. 93 159 62 09  
E. contacto@somnomed.com

### SomnoMed AG

Steinhauserstrasse 74  
CH-6300 Zug  
Switzerland  
[www.somnomed.com](http://www.somnomed.com)

## Escáner intraoral



Escanear y enviar a la nube la impresión dental digital y la mordida protrusiva del paciente



Plazo de entrega de los productos más rápido



Sin materiales de impresión complicados o costosos



Garantiza la precisión y previsibilidad en la producción



Más cómodo para los pacientes - sin arcadas

## Características de SomnoDent

**Mayor comodidad:** Los dispositivos SomnoDent están hechos a medida. Son más cómodos para los pacientes por lo que el tratamiento es más eficaz gracias a su alta tolerancia/cumplimiento.

**Alta calidad:** Utilizamos acrílico de la más alta calidad que no se decolora, y ofrecemos una garantía\* de 2 años en nuestros dispositivos. \*Por favor, consulte los detalles en nuestra web.

**Clínicamente probado:** SomnoMed cumple con nuestra promesa de calidad al fabricar dispositivos que están probados y validados por más de 17 estudios clínicos.

**Selección del dispositivo:** Ofrecemos una amplia gama de dispositivos de estilo dorsal y herbst.

**Conciencia del paciente:** Informamos a los pacientes sobre las soluciones para el tratamiento de la AOS.

**Cumplimiento:** Los clientes califican los productos SomnoDent con un 4 en una escala del 1 al 5.

**Apoyo a los profesionales:** Nuestro equipo de ventas trabaja activamente para conectar a los médicos y dentistas especializados en la Medicina Dental del Sueño, aumentando así las referencias.

**Soporte técnico:** El personal experimentado del laboratorio y del servicio de atención al cliente atienden todas las consultas técnicas y de la elección de productos.

**Soporte de marketing:** Material para pacientes, sitio web y soporte publicitario.



## SomnoDent® AVANT

SomnoDent Avant está diseñado digitalmente para dentistas que desean un dispositivo delgado y duradero con un acabado de calidad.

Nuestro sistema de fabricación CAD-CAM asegura que el ajuste sea más preciso y el dispositivo oral más resistente. Con un innovador sistema de ajuste y revestimiento suave interior b-flex Comfort Liner, Avant es nuestro dispositivo más pequeño y más cómodo; y está especialmente indicado para los pacientes con un paladar estrecho.

Las correas de avance SomnoDent Avant proporcionan un ajuste en incrementos de +1mm, desde la correa anterior.

- Se suministra un kit inicial de 10 correas con su pedido según el tamaño de la mandíbula de su paciente: pequeño, mediano o grande (10 por kit) para cubrir todo el rango de avance mandibular.
- Proceso completamente digital que produce un dispositivo más pequeño, más fuerte y más preciso.
- Garantía de 2 años de SomnoMed.

## SomnoDent® FLEX



Para una mayor comodidad y flexibilidad, Flex ofrece el estándar para un dispositivo oral cómodo con el suave revestimiento interior b-flex Comfort Liner que es termoestable y facilita la adhesión entre las capas y un fórmula altamente reticulada.

Proporciona un cómodo "ajuste a la primera" para los pacientes y requiere un ajuste mínimo.



## SomnoDent® FUSION

Para el máximo confort en innovación y flexibilidad; y con un mayor rango de ajuste, Fusion ofrece confort y comodidad.

Combinación de un sistema de aletas intercambiables y tornillos expansores que permiten aumentar el avance mandibular de forma progresiva y en la posición más cómoda y efectiva para el tratamiento del paciente.

Con el suave revestimiento interior b-flex Comfort Liner para que sea confortable y además ofrecer un "ajuste a la primera".

## SomnoDent® EDENTULOUS



Solución para pacientes parcial o completamente edéntulos.

SomnoMed b-flex Comfort Liner cubre el paladar y se retiene mediante el sellado del palatal posterior.

La oclusión se realiza con una férula inferior utilizando un mecanismo de acoplamiento de dos piezas. Además, el rango de movimiento se conserva sin poner en riesgo la retención de la férula superior con un tirón hacia abajo.

Es necesario un mínimo de 4 a 5 dientes o 2 implantes en la arcada inferior.

## SomMorning Repositioner



Es un desprogramador de mordida.

Diseñado para estabilizar el maxilar inferior y devolver la mandíbula a su posición normal.

Diseñado exclusivamente para que los pacientes realicen ejercicios mandibulares cada mañana después de quitarse la férula SomnoDent.

## SomGauge



SomGauge, de la línea SomnoMed, le proporciona una rápida y sencilla toma del registro de mordida con mayor precisión.

También permite la medición de la apertura vertical con una rampa ajustable. Proporciona una mayor precisión en la impresión y la integridad del producto. Como resultado el aparato bucal es más cómodo para su paciente



## SomTabs

Para una limpieza suave y eficaz de los dispositivos orales SomnoDent, sin dañar el aparato y eliminando eficazmente los olores.

Fabricadas exclusivamente para SomnoMed. No contienen perborato de sodio.